



Splashy Big

Benutzerhandbuch



Family Freedom



Bitte lesen Sie alle Gebrauchsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie den Splashy Big in Gebrauch nehmen. Die Gebrauchsanleitungen können auch von unserer Website **www.fireflyfriends.com** zusammen mit Videos, Diagrammen und anderen nützlichen Downloads heruntergeladen werden.

Inhaltsverzeichnis

- 01 Verwendungszweck
 - 02 Zertifizierung
 - 03 Warn- und Sicherheitshinweise
 - 04 Garantiebedingungen
 - 05 Sicherheitshinweise
 - 06 Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen
 - 07 Reinigungs- und Pflegehinweise
 - 08 Produktüberprüfung und Wartung
 - 09 Wichtige Richtlinien
 - 10 Wiedereinsatz von Firefly Produkten
 - 11 Gebrauchsanweisung
 - 12 Größenangaben
-

ABSCHNITT 01: Verwendungszweck

Verwendungszweck

Die Badehilfen sind zur Unterstützung von Kindern und jungen Erwachsenen gedacht, die leichte bis komplexe Haltungsprobleme aufweisen, wodurch ihre Sitzfähigkeit ohne externe Unterstützung beeinträchtigt wird. Alle Geräte sind für die Verwendung in einer Badewanne oder Dusche vorgesehen, um die Körperpflege zu erleichtern. Splashy Big kann zusätzlich im Freien, wie beispielsweise am Strand oder in einem Wasserpark, zu Erholungszwecken eingesetzt werden.

Indikationen

Splashy Big ist zur Unterstützung von Kindern mit Behinderungen gedacht, die beim Baden eine Kopf- und Rumpfunterstützung benötigen. Für die Struktur, die Sicherheit und den Halt ist es unerlässlich, dass Splashy Big immer an der Bodenstation befestigt wird. Splashy Big wurde für Kinder im Alter von ungefähr 7 bis 14 Jahren und mit einem maximalen Benutzergewicht von 55 kg (121 lbs) entworfen.



Kinder sollten zu keinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt in ihrem Splashy Big Badesitz sein, da die Gefahr besteht, dass sie ertrinken oder sich verletzen.

Wir empfehlen, dass ein Erwachsener die Produktüberprüfungen gemäß Abschnitt 08 dieses Benutzerhandbuchs durchführt, um einen sicheren Umgang zu gewährleisten. Firefly Friends Ltd. und James Leckey Design Ltd. übernehmen keine Verantwortung, wenn das Produkt außerhalb seines Verwendungszwecks verwendet wird. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den Firefly-Kundendienst unter UK 0800 318265 oder ROI 1800 626020.

Tägliche Aktivitäten, die von Firefly Friends Ltd und James Leckey Design Ltd getestet und freigegeben wurden, sind: 1. in der Badewanne oder Dusche

1. in der Badewanne oder Dusche

2. Für Wasserspielaktivitäten

Die Verwendung des Splashy Big außerhalb des Badezimmers (z.B. im Garten oder am Strand) sollte im Voraus geprüft werden. Beachten Sie, dass der Splashy Big aktive Verbindungen zwischen Bodengestell und Sitz enthält, die durch kleine Partikel und/oder Verunreinigungen/Ablagerungen (wie Erde, Gras oder Sand) beeinträchtigt werden können. Falls der Splashy Big mit Substanzen in Berührung kommt die die Verbindungen zwischen Bodengestell und Sitz beeinträchtigt werden könnten, sorgen Sie dafür, dass diese nach Gebrauch gründlich weggespült werden. Sicherheitshinweise finden Sie in Abschnitt 05 und weitere Hinweise zur Reinigung und Pflege in Abschnitt 07.

ABSCHNITT 02: Zertifizierung

Splashy Big ist gemäß den Vorschriften der EU und des Vereinigten Königreichs als Medizinprodukt der Klasse I eingestuft. Als Hersteller erklärt das Unternehmen James Leckey Design Limited, dass das vorliegende Produkt der Medizinprodukteverordnung (2017/745), den UK Medical Device Regulations 2002, der Medizinprodukterichtlinie (93/42 EEC) und der EN 12182:2012 Hilfsmittel für Personen mit Behinderung, allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren entspricht.

Hinweis an den Anwender bzw. Patienten: Jeder schwerwiegende Vorfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Benutzer bzw. Patient seinen Wohnsitz führt, gemeldet werden.

HINWEIS:

Allgemeine Benutzerinformationen.

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Körperverletzungen, Schäden am Produkt oder Umweltschäden führen!

ABSCHNITT 03: Warn- und Sicherheitshinweise

WARNUNG KIPPGEFAHR:

- Lassen Sie Splashy Big niemals auf einem unebenen Boden stehen.
- Vergewissern Sie sich stets, dass die Rückenlehne befestigt ist, bevor der Benutzer in den Splashy Big transferiert wird, und dass die Fußsicherheitsgurte des Benutzers verwendet werden, sobald der Benutzer darin platziert wurde.
- Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt, während es sich im Splashy Big befindet.

VORSICHT TÄGLICHE ÜBERPRÜFUNGEN:

- Splashy Big ist täglich vor Gebrauch zu überprüfen, um zu gewährleisten, dass alle Gurte und Sitzelemente sicher befestigt sind.
- Führen Sie vor der Benutzung des Produkts stets eine Sichtkontrolle durch. Wenn Sie Zweifel haben, STOPPEN Sie. Wenn Sie vermuten oder wissen, dass das Produkt oder ein Teil defekt ist, STOPPEN Sie. Wenden Sie sich so schnell wie möglich an unseren Kundendienst

oder Ihren Händler vor Ort.

VORSICHT FINGERQUETSCHGEFAHR:

- Achten Sie bei der Montage oder Positionsverstellung der Sitzkomponenten darauf, dass Ihre Finger beim Positionieren der Sitzkomponenten und beim Festziehen der Halterungen nicht gequetscht werden.
- Die Pflegekraft sollte keine beweglichen Gelenke oder Drehpunkte berühren, die nicht verriegelt sind.

WARNUNG FINGEREINKLEMMGEFAHR:

- Achten Sie darauf, dass die Finger des Bedieners oder des Kindes nicht in den Zwischenräumen zwischen Sitz und Rahmen eingeklemmt werden. Achten Sie auch beim Schließen des Bodenstabilisators darauf, dass die Finger des Kindes nicht in das Produkt gelangen.

WARNUNG INSASSENSICHERHEIT:

- Stellen Sie das Produkt in seine Therapieausrichtung ein und überprüfen Sie seine Stabilität, bevor Sie den Benutzer in das Produkt platzieren.
- Der Transfer des Benutzers in das und aus dem Produkt muss mit geeigneter Ausrüstung und Personal erfolgen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Insasse unmittelbar nach dem Transfer mit den Gurtegurten

gesichert wird. Achten Sie beim Verstellen der Rückenlehne nach hinten auf unwillkürliche Bewegungen, die zum Einklemmen zwischen Sitz und Rahmen/Wanne führen können. Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt, während es sich im Splashy Big befindet.

- Kippgefahr für den Benutzer – wenn die Gurte während der Körperpflege gelöst werden müssen, könnte das Kind abrutschen oder aufgrund der fehlenden Rumpfkontrolle nach vorne kippen.
- Ertrinkungsgefahr bei zurücklehnenen Produkt in eine sehr tiefen Badewanne.
- Wenn der Benutzer irgendeine Form von Stress zeigt, transferieren Sie ihn so schnell und sicher wie möglich aus dem Produkt.

VORSICHT REINIGUNG:

- Reinigen Sie das Produkt regelmäßig, um die Ansammlung von Schmutz zu verhindern. Angesammelter Schmutz kann zu einem vorzeitigen Verschleiß der Sitzschale führen und die Korrosion im Rahmen fördern. Verwenden Sie ausschließlich nicht scheuernde Haushaltsreiniger und feuchte Tücher.

VORSICHT BEI DER REINIGUNG MIT HOCHDRUCKREINIGERN/ SCHLÄUCHEN: Verwenden Sie keine

- Schläuche oder Hochdruckreiniger

an den Rahmenteilen. Der Rahmen ist nicht gegen fließendes Wasser abgedichtet und kann durch Wassereintritt beschädigt werden.

VORSICHT LAGERUNG:

- Das Produkt sollte von allen direkten Wärmequellen ferngehalten werden, einschließlich offener Flammen, Zigaretten, Elektro- und Gasheizungen.

VORSICHT BEI DER INBETRIEBNAHME:

- Wenn Sie Splashy Big nach der Lagerung in Gebrauch nehmen, lassen Sie ihn zunächst an die Umgebungstemperatur akklimatisieren.

VORSICHT BEI DER ENTSORGUNG:

- Entsorgen Sie Splashy Big nur in einer kommunalen Mülldeponie unter der richtigen Recycling-Kategorie.

ABSCHNITT 04: Garantiebedingungen

Die Garantie für den Splashy Big kommt ausschließlich dann zum Einsatz, wenn das Produkt bestimmungsgemäß verwendet wird und alle Herstellerangaben eingehalten werden. Auf dieses von James Leckey Design Ltd. hergestellte Produkt wird eine einjährige Garantie gewährt.

Die Ware kann bis zu 12 Monaten nach Erhalt zur Gewährleistung, Reparatur oder zum Austausch an

uns zurückgesendet werden. Sobald Sie uns kontaktieren, organisieren wir die Abholung der Ware auf unsere Kosten. Nach Erhalt der Rücksendung, reparieren wir oder ersetzen wir die Ware und schicken sie innerhalb von 14 Tagen an Sie zurück. In allen Fällen liegt es in der Verantwortung des Kunden, dafür zu sorgen, dass alle für die Rücksendung bestimmten Waren angemessen verpackt sind, vorzugsweise in der Originalverpackung.

ABSCHNITT 05: Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie das Benutzerhandbuch vor Gebrauch immer vollständig durch.
2. Kinder sollten in diesem Produkt zu keinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt bleiben.
3. Wenn Sie den Splashy Big am Strand verwenden, lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt in der Nähe des Meeres.
4. Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Splashy Big Komponenten gemäß den Benutzeranweisungen sicher montiert sind. Der Splashy Big muss jederzeit an dem Bodengestell befestigt sein und auf eine feste, stabile und statische Unterlage gestellt werden. Verwenden Sie den Splashy Big niemals auf einer schrägen Fläche.



Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sie oder das Kind gefährden.

5. Das maximale Benutzergewicht für den Splashy Big beträgt 55 kg (121 lbs). Es Dieses Gewicht sollte auf keinen Fall überschritten werden.
6. Splashy Big enthält Teile, die für Kleinkinder eine Erstickungsgefahr darstellen können. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob alle Komponenten fest und sicher befestigt sind - einschließlich Halterungen und Gurte.
7. Verändern Sie den Splashy Big nicht und verwenden Sie zu keinem Zeitpunkt andere als von Firefly zugelassene Komponenten. Dies kann Ihr Kind gefährden und zum Verlust der Garantie führen.
8. Wenn Sie den Splashy Big in Umgebungen mit Erde/Sand/Gras oder Kleinteilen verwenden, achten Sie stets darauf, dass Sie die Verbindungen zwischen Bodengestell und Sitz nach jedem Gebrauch reinigen, um Beeinträchtigungen zu vermeiden. Wenn Sie das Bodengestell erneut mit dem Sitz verbinden möchten, schlagen Sie Abschnitt 11.2.8 nach.
9. Lassen Sie den Splashy Big nach Gebrauch gründlich trocknen, bevor Sie das Produkt vorsichtig verstauen. Der Splashy Big sollte von allen direkten Wärmequellen ferngehalten werden, einschließlich offener Flammen, Zigaretten, Elektro- und Gasheizungen.
10. Reinigen Sie das Produkt regelmäßig gemäß Abschnitt 07 dieses Benutzerhandbuchs.
11. Führen Sie regelmäßige Wartungskontrollen durch, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt in einem einwandfreien Zustand ist. Der Splashy Big sollte nicht verwendet werden, wenn eines der Teile defekt ist.
12. Wenn Sie Zweifel an der sicheren Verwendung des Splashy Big's oder des Bodengestells haben oder wenn Teile fehlerhaft sind oder fehlen/ unvollständig sein sollten, stellen Sie die Verwendung des Produkts umgehend ein und wenden Sie sich bitte an den Firefly-Kundendienst unter 0800 318265 oder ROI 1800 626020.
13. Alle Werbeartikel, die mit dem Splashy Big mitgeliefert werden, sollten nicht unbeaufsichtigt verwendet werden.
14. Bei der Verwendung des Stabilisators ist darauf zu achten, dass er vollständig verriegelt ist.
15. Es ist uns nicht möglich, Ihnen eine spezialisierte Bewegungs- und Handhabungsberatung zukommen zu lassen, da die Umstände in jeder Familie unterschiedlich sind. Wenn Sie eine Anleitung für die Bewegung und Handhabung benötigen, sprechen Sie mit Ihrem Therapeuten

Unsachgemäße Bewegung und Handhabung kann Ihnen und Ihrem Kind Verletzungen zufügen.

Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Anwendung, von Ihrem Therapeuten über Bewegungs- und Handhabungshinweise beraten zu lassen.

ABSCHNITT 06: Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen

Vorsichtsmaßnahmen

- Fixierte Wirbelsäulendeformitäten wie Skoliose oder Kyphose
- Schwere Muskelkontrakturen
- Schwere muskuläre oder skelettale Asymmetrie einschließlich Hüftluxation
- Progressive und Muskelschwundzustände
- Hohes Risiko von Knochenbrüchen in der Vorgeschichte
- Hohes Risiko für druckbedingte Verletzungen oder offene Wunden
- Starke, unkontrollierte Bewegungsmuster
- Schlecht eingestellte Krampfanfälle
- Kinder mit einer perkutanen endoskopischen Gastrostomie (PEG)
- Medizinische Instabilität einschließlich eingeschränkter Atem- oder Herz-Kreislauf-Funktion
- Abhängig von lebenserhaltenden Fremdgeräten wie Sauerstoffflaschen
- Signifikante Lernbehinderungen und/oder Verhaltensauffälligkeiten

junger Erwachsener unbeaufsichtigt im Gerät verbleiben sollte, wenn es in Betrieb ist oder mit Wasser in Berührung kommt

Alle Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen liegen im Ermessen der Eltern oder des/r verordnenden Kliniklers/in.

Kontraindikationen

Es gibt keine Kontraindikationen im Zusammenhang mit den Badehilfen. Die Gebrauchsanweisung weist bei allen Produkten darauf hin, dass kein Kind oder

ABSCHNITT 07: Reinigungs- und Pflegehinweise

Instandhaltung

- Zur Reinigung des Splashy Big´s empfehlen wir, nur warmes Wasser und ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel zu verwenden. Benutzen Sie niemals organische Lösungsmittel oder chemische Reinigungsmittel
- Reinigen Sie die Schaumkomponenten des Splashy Big´s nicht in der Maschine oder mit Dampf, da dies zur Verformung des Schaums führen kann.
- Wir empfehlen Ihnen, während des Badevorgangs keine verschriebenen medizinischen Lotionen im Badewasser zu verwenden, da dies zum Materialienabbau von des Splashy Big´s beitragen kann.
- Befreien Sie die Badewannenoberfläche von Rückständen oder Schmutz, bevor Sie die das Bodengestell daran befestigen, und achten Sie darauf, dass die Gummifüße fest an der Badewanne haften.
- Um Sand, Boden, Erde, Gras oder kleine Partikel zu entfernen, die sich in den Verbindungen zwischen Bodenstation und Sitz befinden können, wird durch leichtes Klopfen des Bereichs das Herausfallen der Partikel gefördert. Spülen Sie den Splashy Big gründlich ab, um zu gewährleisten, dass sich

keine Partikel in den Verschlüssen ansammeln. Bei hartnäckigen Verstopfungen/Blockaden an dem Bodengestell kann die Verriegelung mit einem Daumendruck betätigt werden, um Partikel zu entfernen und die Freisetzung zu erleichtern.

- Sollte der Badewannensitz mit Salzwasser in Berührung kommen, spülen Sie alle Teile mit frischem, sauberem Wasser gründlich ab.

5-Punkte-Gurt

Der Splashy Big 5-Punkte-Gurt kann entfernt und mit Seifenwasser gereinigt werden.

Bodengestell/Untergestell


1. Vergewissern Sie sich, dass der Boden der Bodenstation und des Stabilisators nach jedem Gebrauch gereinigt werden, um die Haftung auf dem Wannensboden zu gewährleisten.
2. Für die tägliche Reinigung können Seife und Wasser verwendet werden.
3. Verwenden Sie keine Lösungsmittel zur Reinigung der Bodenstation.

Sitzbasis aus Schaumstoff, Rückenstütze und Stützen von des Splashy Big´s


1. Für die tägliche Reinigung können Seife und Wasser verwendet werden.
2. Die EVA-Schaumstoffbezüge können entfernt und regelmäßig gewaschen werden, um eine Ansammlung von Rückständen und Schmutz zu vermeiden.

Die EVA-Schaumstoffbezüge von des Splashy Big´s können entfernt und alle paar Monate gewaschen werden.


1. Die EVA-Abdeckungen sind mit acht Haken befestigt. Zwei an der Rückenlehne und sechs an der Sitzfläche.
2. Alle Haken von Hand lösen alle Haken von Hand (kein Werkzeug verwenden).
3. Verwenden Sie Seifenwasser zur Reinigung.
4. Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckungen vor dem Wiederanbringen vollständig trocken sind.
5. Achten Sie darauf, dass alle Haken eingerastet sind, wenn Sie die Abdeckungen wieder anbringen.

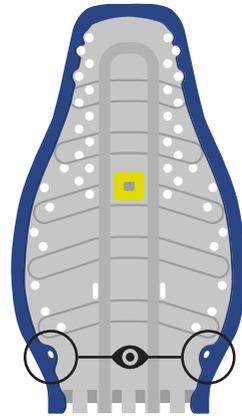

Hakenpositionen

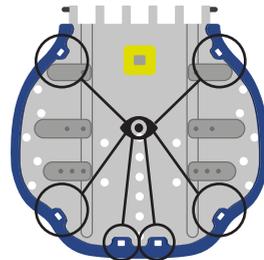

Sollte der Splashy Big in Umgebungen außerhalb des Badezimmers (z.B. am Strand oder im Garten) verwendet werden, ist es wichtig, den Sitz nach jedem Gebrauch so zu spülen, dass er frei von Partikeln/Verstopfungen ist, damit seine Funktionsmechanismen nicht beeinträchtigt werden. Für den Wiederanschluss der Bodenstation an den Sitz siehe Abschnitt 11.2.8.

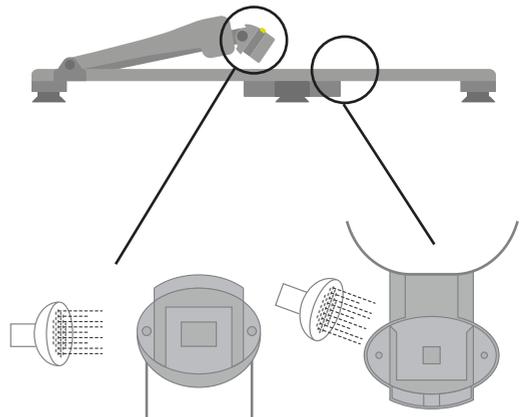

ABSCHNITT 08: Produktüberprüfung und Wartung

Wir empfehlen, dass vor jedem Gebrauch verschiedene Kontrollen von des Splashy Big´s durchgeführt werden, um zu gewährleisten, dass das Produkt sicher ist.

Die empfohlenen Überprüfungen:
wie folgt:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Splashy Big Rückenlehne und die Sitzfläche sicher miteinander verbunden sind, wie in Abschnitt 11 dieser Anleitung beschrieben.
2. Überprüfen Sie, ob Der Splashy Big korrekt an dem Bodengestell befestigt ist und vergewissern Sie sich, dass der Sitz stabil und sicher in der Badewanne haftet, bevor Sie das Kind hineinsetzen. (Hinweis: Für die Verwendung von des Splashy Big´s in der Badewanne ist kein Stabilisator erforderlich.)
3. Vergewissern Sie sich, dass der 5-Punkte-Gurt und die Polster mit den Halterungen sicher am Splashy Big befestigt sind.
4. Überprüfen Sie den 5-Punkte-Gurt und die die Polster auf Verschleißerscheinungen.
5. Überprüfen Sie die Verschlüsse und Hebel/Halterungen auf Risse oder Beschädigungen.

6. Überprüfen Sie, ob Der Splashy Big sowie alle Riegel und Verbindungen an der Bodenstation dem Bodengestell frei von Schmutz oder Ablagerungen sind und keine Abnutzungserscheinungen aufweisen.



Wenn Sie Zweifel an der sicheren Verwendung Ihres Firefly Produkts haben oder wenn Teile fehlen/fehlerhaft sein sollten, stellen Sie die Verwendung des Produkts ein und wenden Sie sich so schnell wie möglich an unsere Kundendienstabteilung.

Für alle Servicefragen wenden Sie sich bitte an die Firefly Website www.fireflyfriends.com oder an customer.enquiries@fireflyfriends.com

ABSCHNITT 09: Wichtige Richtlinien

Achten Sie darauf, dass Der Splashy Big sicher in der Badewanne sitzt positioniert ist. Senken Sie die Rückenlehne in eine mittlere nach hinten gelehnte Position für Kinder, die beim Transfer Hineinsetzen helfen behilflich sein können oder in die Wanne gehoben werden. Bitte beachten Sie Abschnitt 11.6.

Bei Kindern, die in die Badewanne gehoben werden, sollte die Rückenlehne vollständig nach hinten gelehnt sein. Dies sollte das Hineinsetzen in den Splashy Big Badewannensitz erleichtern.

Wir empfehlen Ihnen, den 5-Punkt-Gurt und die Polster am Splashy Big anzubringen, bevor Sie das Kind hinein platzieren. Sie können bei Bedarf jedoch angepasst werden, sobald sich Ihr Kind in der Badewanne befindet. Bitte seien Sie vorsichtig und überwachen Sie Ihr Kind genau, während Veränderungen am Badewannensitz vorgenommen werden.

Das Heben eines Kindes in die Badewanne und anschließend wieder heraus ist eine Aktivität, die zu Verletzungen des Rückens führen kann. Wir empfehlen Ihnen, sich von Ihrem Therapeuten darüber beraten zu lassen, wie Ihr Kind sicher in und aus der Badewanne befördert (Bewegungs- und Handhabungstechniken) werden kann.

ABSCHNITT 10: Die Wiederausgabe von Firefly Produkten

Vor der erneuten Zuteilung eines Produkts wird die Desinfektion mit einem der folgenden Verfahren empfohlen:


Hinweis: Entfernen Sie immer zuerst angesammelten Schmutz, bevor Sie das Produkt desinfizieren.

1. Wenn möglich, empfehlen wir, ein automatisiertes „Nebelsystem“ für die Desinfektion zu verwenden, mit dem alle Oberflächen des Produkts mit einem Desinfektionsmittel behandelt werden. Die Anweisungen des Herstellers des gewählten Systems sind vor dem Gebrauch durchzulesen und genau zu beachten.
2. Wenn kein automatisiertes Desinfektionssystem verfügbar ist, sollten alle Oberflächen des Produkts mit desinfizierenden Wischtüchern oder mit einem weichen Tuch, das mit einem flüssigen Desinfektionsmittel getränkt wurde, abgewischt werden. Dafür sind folgende Produkte geeignet: IPA 70 %, Alkohol 70 % oder verdünnte Bleiche. Die Anweisungen des Herstellers für das ausgewählte Produkt sind zu beachten. Die Bespannung und Stoffe des Produkts sollten wie im Abschnitt „Reinigung und Pflege“ in diesem Handbuch beschrieben gründlich gereinigt werden.

Achten Sie darauf, dass eine Kopie des Benutzerhandbuchs dem Produkt beiliegt. Wenn Sie Zweifel an der weiteren sicheren Verwendung Ihres Firefly Produkts haben oder (wenn) Teile fehlen oder fehlerhaft sein sollten, stellen Sie bitte die Verwendung des Produkts ein und wenden Sie sich so schnell wie möglich an unsere Kundendienstabteilung unter 0800 318265 oder ROI 1800 626020.

ABSCHNITT 11: Gebrauchsanweisung

11.1 Splashy Big Einzel-Teile

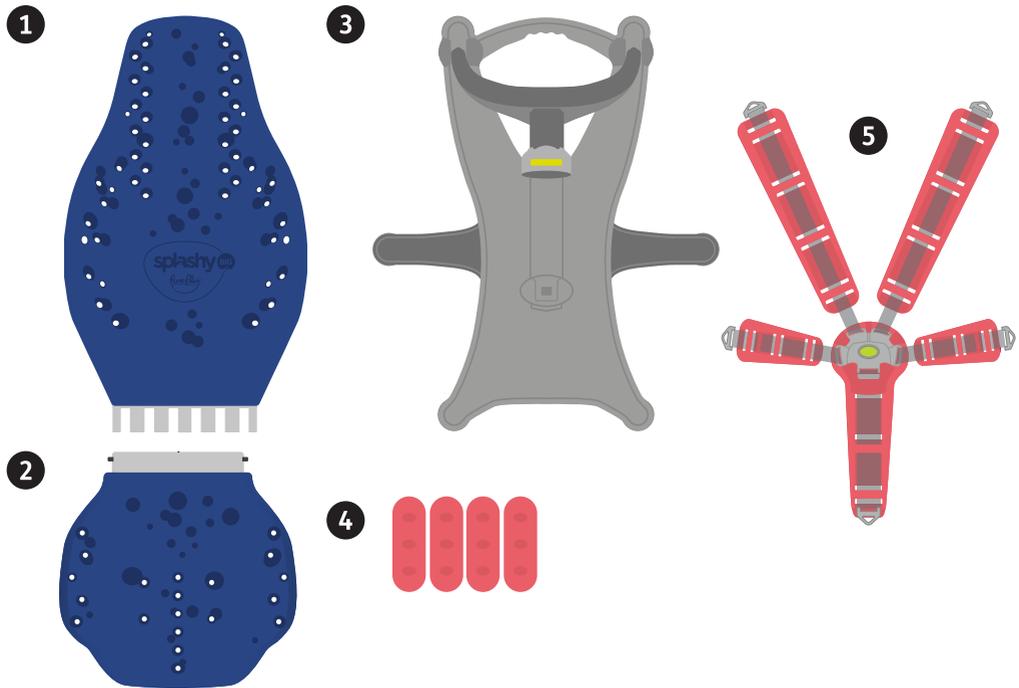

Ihr Splashy Big wird mit den folgenden Teilen geliefert:


- 1** 1x Rückenlehne
- 2** 1x Sitzbasis
- 3** 1x Bodengestell
- 4** 4x Polster
- 5** 1x Hüftgurt & 4x Trapezgurte

11.2 Die Montage von des Splashy Big´s

- Wir empfehlen Ihnen dringend, einen Probelauf mit Ihrem Kind im Splashy Big durchzuführen. Es sollte dabei leichte Kleidung tragen, um die richtige Platzierung des Gurts und der Polster zu gewährleisten.
- Vergewissern Sie sich, dass die Badewanne sauber und frei von Rückständen ist, bevor Sie das Bodengestell hineinstellen.
- Ihr Splashy Big MUSS VOR dem Befüllen der Wanne montiert werden. Wir empfehlen Ihnen, die Badewanne mit einer Mischung aus heißem und kaltem Wasser zu füllen, um Schäden am Splashy Big zu vermeiden.
- Schlagen Sie Abschnitt 11.6.1 nach, um eine Anleitung zur Positionierung des Neigungsarms am Splashy Big zu erhalten.

11.2.1 Die Platzierung des Bodengestells

Das Bodengestell sollte immer auf einer festen, stabilen und statischen Unterlage aufgestellt werden. Wenn Sie den Bodenbelag auf die von Ihnen gewählte Oberfläche legen, ist es wichtig, dass sich alle Gummifüße auf der Oberfläche anliegend befinden. Obwohl der Stabilisator bei der Verwendung des Splashy Big´s in der Badewanne nicht benötigt wird, ist es wichtig, dass er außerhalb der Wanne vollständig in seine „verriegelte“ Position gedreht wird.

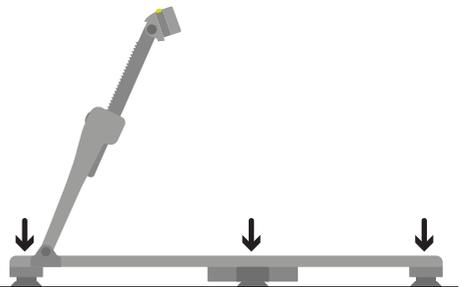


Fortgesetzt →

11.2.2 Die Verwendung der Stabilisatorfunktion




Verwenden Sie den Stabilisator immer, wenn Sie den Splashy Big außerhalb des Bades verwenden, um die Kippgefahr zu begrenzen.

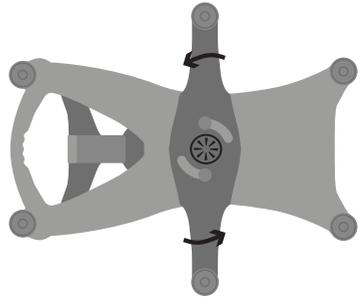

Achten Sie auf ein hörbares Klicken beim Verriegeln des Stabilisators.

11.2.3 Platzierung des Bodengestells

Sobald das Bodengestell platziert ist, achten Sie darauf, dass der Neigungsarm in der höchsten Position festgestellt ist.

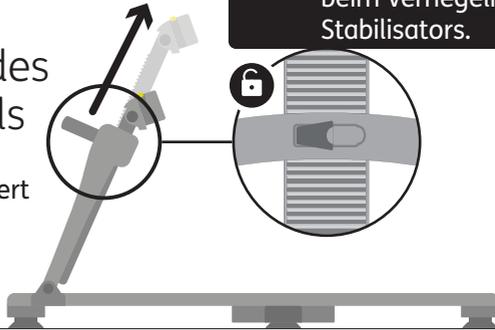

11.2.4 Die Montage des Splashy Big Sitzes


1

Bevor Der Splashy Big an dem Bodengestell befestigt wird, müssen Rückenlehne und Sitzbasis montiert werden.

2


Halten Sie die Rückenlehne von des Splashy Big's senkrecht nach oben mit den Nuten der jeweiligen Nut obenan. Schieben Sie mit der anderen Hand die Sitzbasis in die Nuten an der Rückenlehne ein.

Drehen Sie das Sitzgestell in die entgegengesetzte Richtung, um die Verbindung zu verriegeln. Nach dem Verbinden wird die Scharnierschaumklappe unter den Lehnenbezug aus Schaumstoff eingeführt.

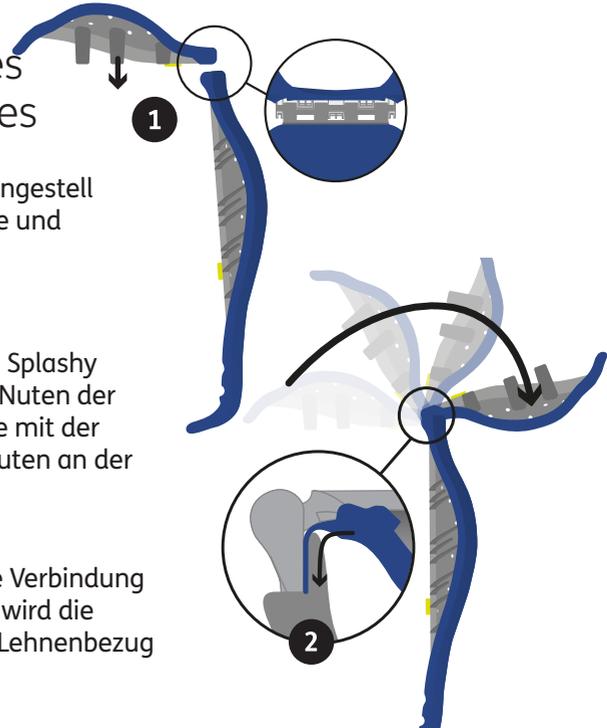


11.2.5 Das Anbringen und Konfigurieren des Gurts und der Polster


- 1 Um einen der Haltegurte und Polster an der Sitzfläche und Rückenlehne des Splashy Big's zu befestigen, stecken Sie den entsprechenden Knebel Hebel durch das Loch.
- 2 Sichern Sie ihn, indem Sie den Hebel seitlich unter dem Sitz drehen.

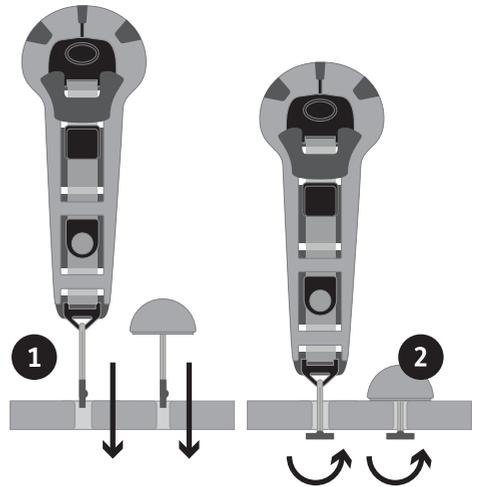

Um die Schulter- und Seitenriemen zu verbinden, folgen Sie diesem Diagramm.


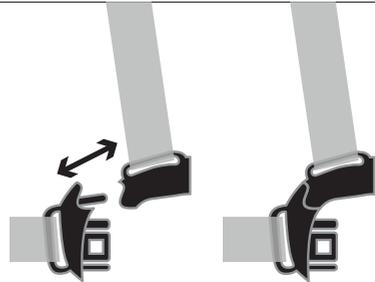


Um zu gewährleisten, dass Sie die Riemen auf der richtigen Seite von des Splashy Big's platzieren, sollte die Schnalle wie abgebildet aussehen.

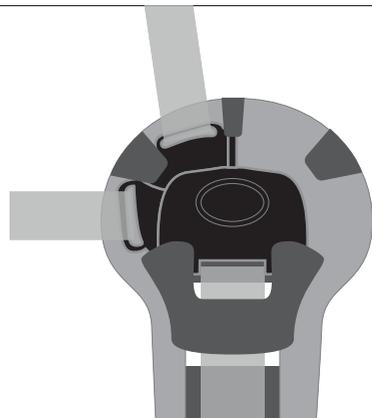

11.2.6 Das Konfigurieren des 5-Punkt-Gurts


- 1 Stecken Sie den Hebel/ Gurt des Leistenriemens in die Splashy Big Sitzbasis ein.
- 2 Führen Sie den Hebel/ Gurt des linken Schulterriemens durch das Loch in der für Ihr Kind richtigen Höhe ein.
- 3 Stecken Sie den Hebel/ Gurt des linken seitlichen Riemens in ein Loch an den Seitenwänden der Rückenlehne.
- 4 Wiederholen Sie den Vorgang für die rechten Schulter- und Seitenriemen.
- 5 Sobald alle Riemen sicher an ihrem Platz sind, verbinden Sie alle Riemen mit der Schnalle zu einem 5-Punkte-Gurt.
- 6 Die Riemen können durch Lösen der Klemme Halterung/ Klemmschelle vollständig eingestellt werden, wodurch der Riemen je nach Anforderung enger straffer oder lockerer gelockert wird. Bitte vergewissern Sie sich, dass die Klemme Halterung/ Klemmschelle nach Einstellen des Riemens geschlossen ist.

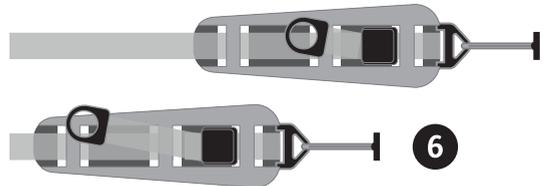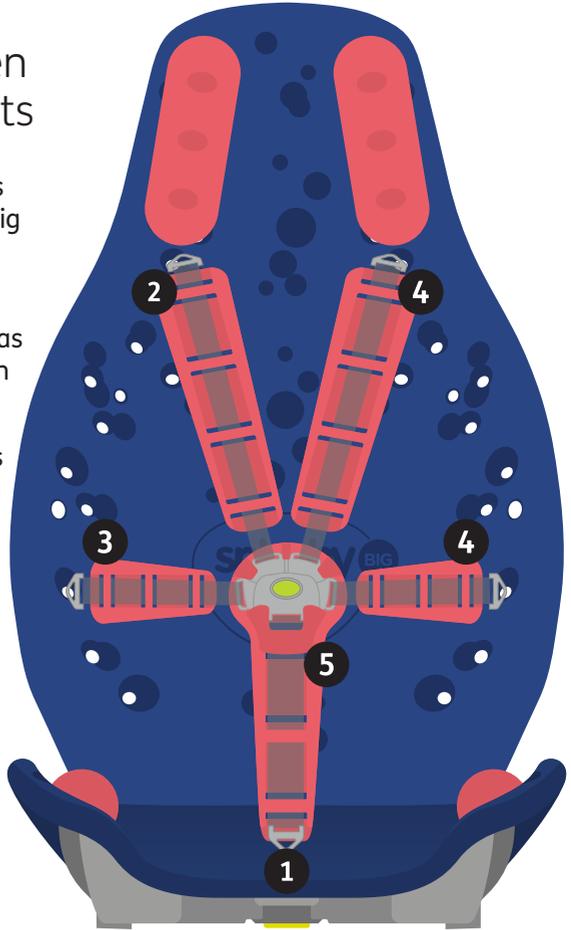

Tipp: Wenn Sie mit der Einstellung zufrieden sind, können Sie den restlichen Teil des Riemens durch den Schaumstoffteilabschnitt des Gurts fädeln, damit er aufgeräumt ist um den restlichen Teil ordentlich zu verstauen

11.2.7 Das Konfigurieren des 3-Punkte-Gurts


- 1 Stecken Sie den Knebel Hebel/ Gurt des linken seitlichen Riemens in ein Loch an den Seitenwänden der Rückenlehne.
- 2 Wiederholen Sie den Vorgang für den rechten seitlichen Riemen.
- 3 Sobald alle Riemen sicher an ihrem Platz sind, verbinden Sie alle Riemen mit der Schnalle dem jeweiligen Verschluss zu einem 3-Punkte-Gurt.

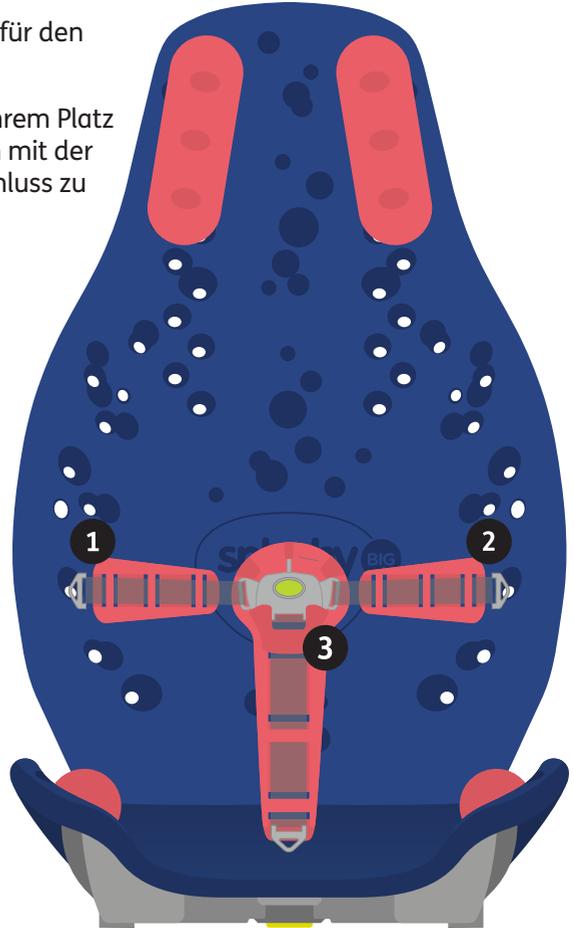


Stellen Sie die Konfiguration von einem 5-Punkte-Gurt zu einem 3-Punkte-Gurt nicht ein, wenn sich das Kind im Badewannensitz befindet.

11.2.8 Das Anbringen des Splashy Big Sitzes an dem Bodengestell


- 1 Lassen Sie Splashy Big mit der Sitzfläche flach auf das Bodengestell herunter.
- 2 Vergewissern Sie sich, dass die Sitzbasis mittig auf dem Bodengestell ausgerichtet ist und bewegen Sie die Sitzbasis nach vorne, damit sie in den Verriegelungskanal gleitet.
- 3 Wenn die Sitzbasis in dem Bodengestell einrastet, hören Sie ein Klicken, das Ihnen das Einrasten des Schlosses bestätigt.

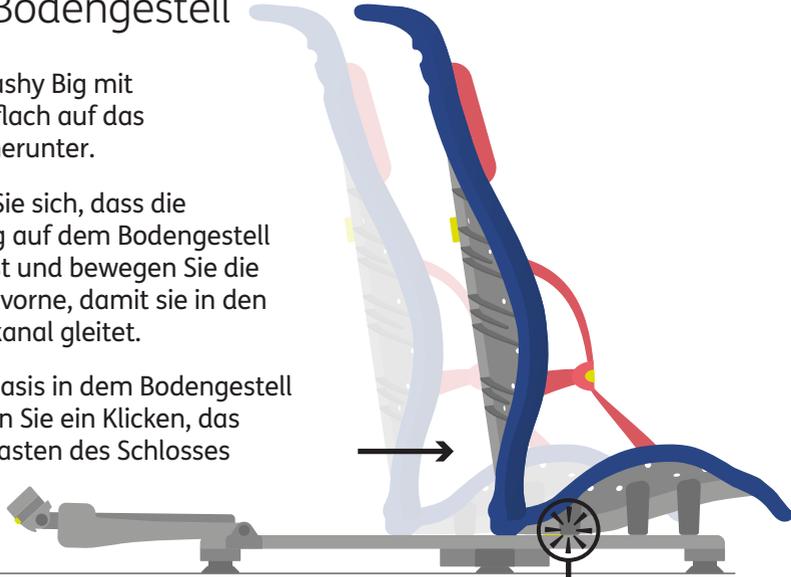

Achten Sie auf ein hörbares Klicken, wenn Sie sowohl Sitzbasis als auch Rückenlehne mit der Bodenstation dem Bodengestell verbinden.

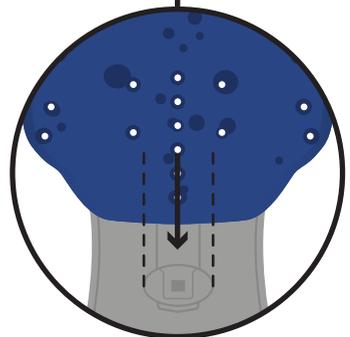


Bevor Sie den Neigungsarm an der Rückenlehne befestigen, vergewissern Sie sich, dass er sich in der höchsten Position befindet. Sobald er richtig befestigt ist, hören Sie ein Klicken.

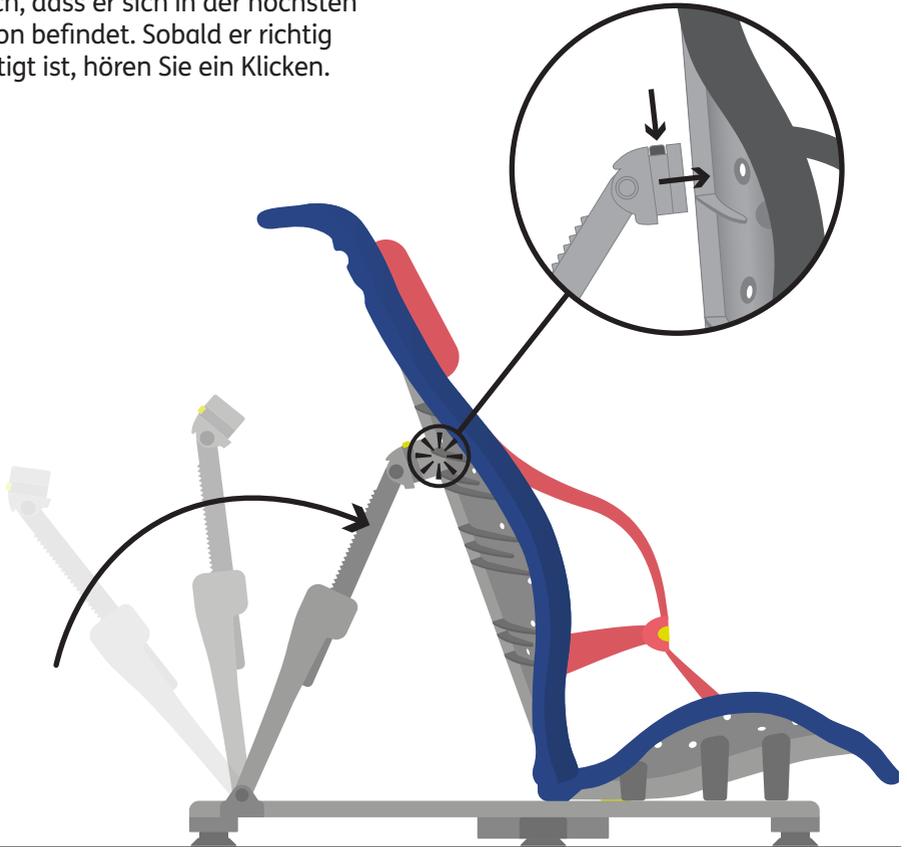

Dieses Bild zeigt, wie der Badewannensitz im fertig montierten Zustand aussehen sollte.

Es ist jetzt sicher, Ihr Kind in den Splashy Big Sitz zu platzieren.

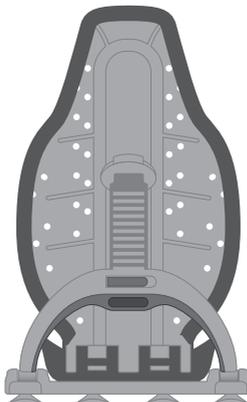

11.3 Polster-Set

Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Kind weitere Unterstützung Polster im Splashy Big benötigt, können Sie zusätzliche Polster aus dem Zubehörbereich der Firefly Website erwerben.

www.fireflyfriends.com/uk/
unsere Produkte#Zubehör



11.3.1 Das Einstellen der Polster zur Unterstützung an verschiedenen Stellen

Die Polster können verwendet werden als:




1. **Kopfstützen** - platzieren Sie ein Polster auf der rechten und linken Seite des Kopfes Ihres Kindes.

2. **Nackenstütze** - legen Sie ein Polster seitlich in den Nacken Ihres Kindes.

3. **Spreizkeil** - platzieren Sie ein Polster zwischen den Beinen Ihres Kindes (hilft, Überkreuzungen zu vermeiden).

4. **Beinführungen** - platzieren Sie Polster auf der rechten und linken Seite der Beine Ihres Kindes (verhindert, dass es über die Seite des Badewannensitzes fällt).

5. **Rutschfeste Ablage** - legen Sie ein Polster seitlich an die Basis des Badewannensitzes vor das Gesäß Ihres Kindes (verhindert, dass das Gesäß Ihres Kindes im Sitz nach vorne rutscht). Einige Kinder finden es vielleicht bequemer, im Splashy Big zu sitzen, wenn ein Polster vor dem Leistenriemen platziert wird.

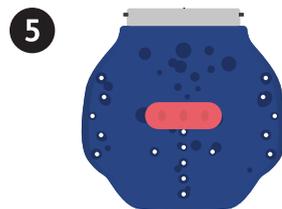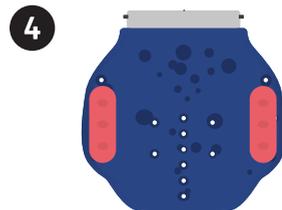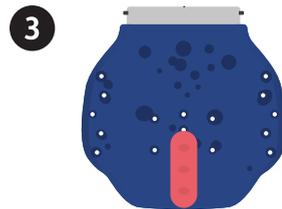

11.4 Das Anpassen des Gurts beim Waschen des Kindes

Entfernen Sie einen Schultergurt,
um einen 4-Punkte-Gurt
herzustellen und so den
Waschvorgang zu erleichtern.

Um den Schulterriemen zu
entfernen, lösen Sie den
Hebel/ die Halterung auf der
Rückseite der Rückenlehne.




Entfernen Sie einen seitlichen Riemen, um einen 4-Punkt-Gurt herzustellen und den Waschvorgang der unteren Körper-Hälfte zu erleichtern.

Um den seitlichen Riemen zu entfernen, lösen Sie den Hebel/ Gurt von der Rückseite der Rückenlehne.




11.5 Das Kürzen der Seiten- und Schulterriemen

In einigen Fällen möchten Sie vielleicht die Größe der Seiten- und Schulterstützen reduzieren, um ein Kleinkind mit dem Splashy Big zu versorgen.

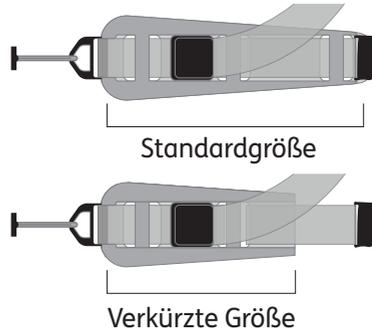


- 1 Wenn Ihr Splashy Big ankommt, sehen die Riemen wie in der Abbildung dargestellt aus. Um die Riemen enger einzustellen, folgen Sie bitte diesen folgenden Anweisungen.
- 2 Entfernen Sie den markierten Abschnitt des Riemens vom Schaumstoff.
- 3 Falten Sie das dünnere Ende des Schaumstoffs nach hinten und achten Sie darauf, dass die Öffnungen aufgestellt sind.
- 4 Führen Sie die Riemen durch die erste Öffnung auf dem doppelten Schaumstoff.
- 5 Sobald die Riemen vollständig durchgezogen sind, führen Sie sie durch die zweite Öffnung nach oben und ziehen Sie sie fest.

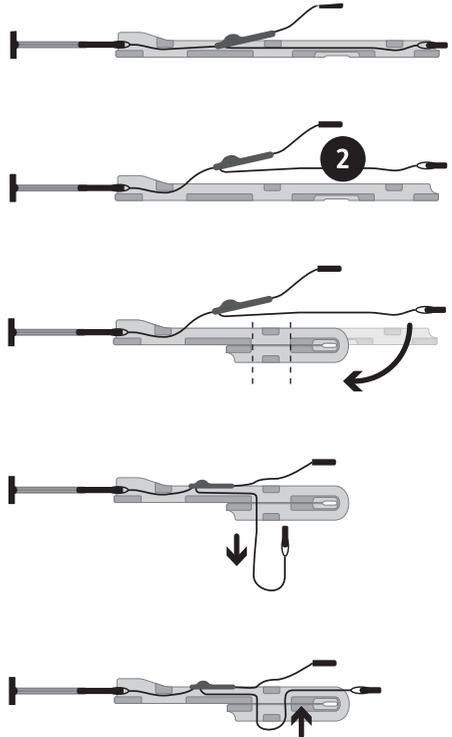


11.5.1 Das Kürzen des Leistenriemens

In einigen Fällen können Sie den Leistenriemen verkürzen, um ein Kleinkind mit dem Splashy Big zu versorgen.

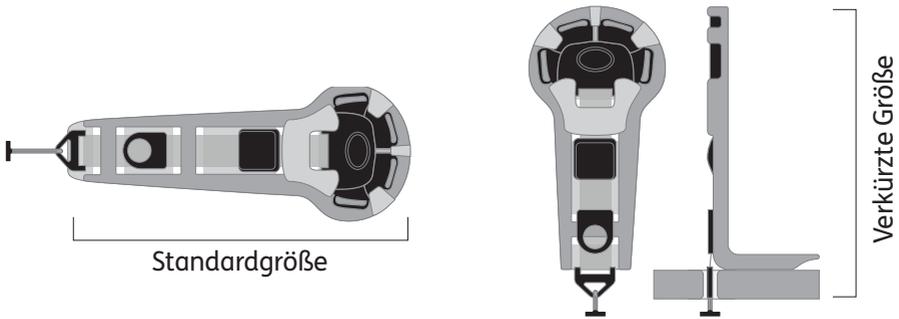

- 1 Der Leistenriemen wird bei der Lieferung so aussehen, wie im Diagramm dargestellt. Um die Riemen kürzer einzustellen, folgen Sie bitte diesen Anweisungen.
- 2 Entfernen Sie den markierten Abschnitt des Riemen vom Schaumstoff.
- 3 Falten Sie den Schaumstoff nach hinten, um einen kürzeren Leistenriemen zu erhalten, und führen Sie den Hebel/ die Halterung zurück durch das Loch in der Sitzbasis.

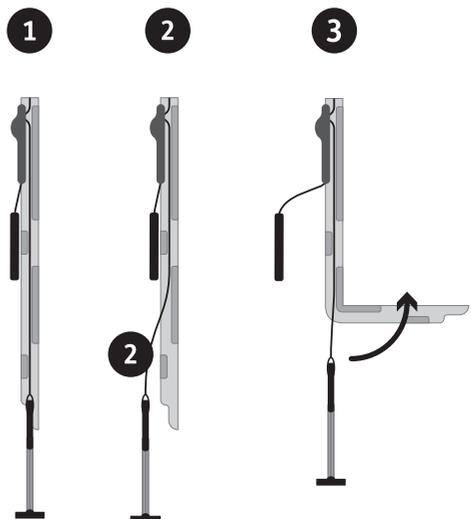

11.6 Empfohlene Liegepositionen


Aufrechte Position - Wenn Ihr Kind über eine gute Sitztoleranz und Rumpfkontrolle verfügt, kann es eine aufrechte Sitzposition einnehmen.



Mittlere Liegeposition - Wir empfehlen, dass der Splashy Big in eine mittlere Liegeposition gebracht wird, wenn Ihr Kind in den Badewannensitz gehoben wird.



Vollständige Liegeposition - wir empfehlen, dass der Splashy Big in die vollständige Liegeposition gebracht wird, um den Transfer zu erleichtern, wenn Ihr Kind in den Badewannensitz geliftet gesetzt wird.

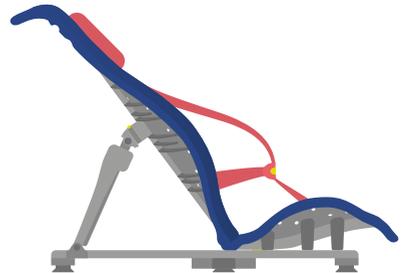


11.6.1 Die Verwendung der Splashy Big Liegefunktion

Sobald Ihr Kind völlig sicher und gestützt ist, kann die Splashy Big Liegefunktion verwendet werden.


Ändern Sie den Neigungswinkel ganz vorsichtig. Sie sollten darauf achten, diese Bewegung so reibungslos wie möglich zu gestalten, um mögliche Ängste des Kindes zu reduzieren.

Um den Splashy Big in eine aufrechtere Position zu bringen, legen Sie eine Hand zur Unterstützung auf den Splashy Big Griff **A** oben an der Rückenlehne und die andere Hand auf die grüne Klammer am Neigungsarm der Bodenstation. **B**

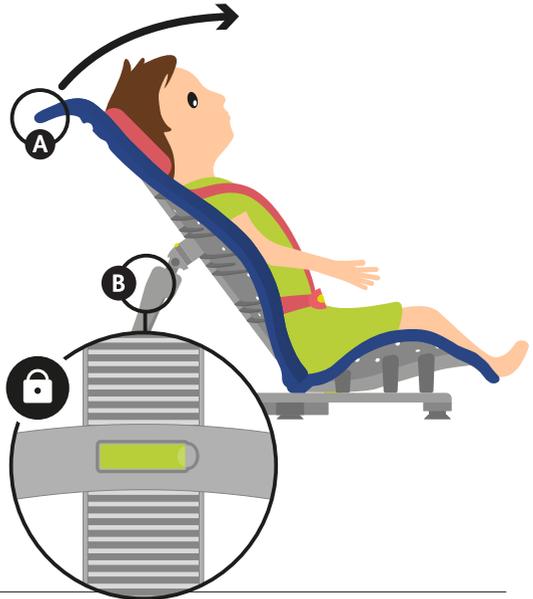

Lösen Sie die Klammer und bringen Sie den Badewannensitz in eine für Ihr Kind geeignete aufrechte Position. **A**

Befestigen Sie die Klammer an der Bodenstation dem Bodengestell. Sie hören ein Klicken, wenn Sie vollständig eingerastet ist.

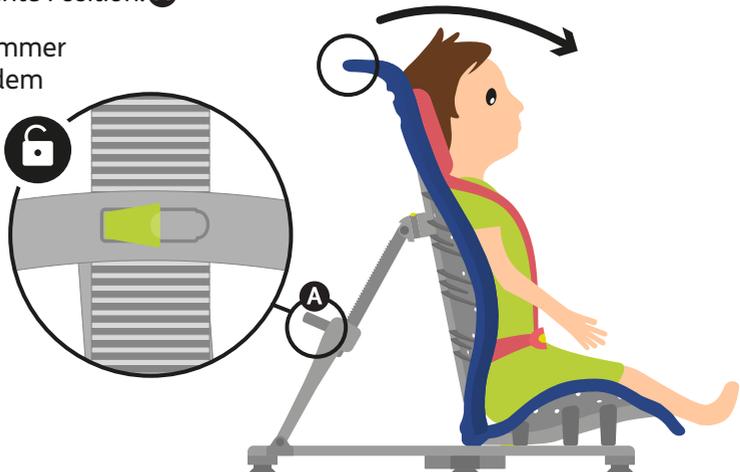

11.7 Das Entfernen von des Splashy Big´s aus der Badewanne nach Gebrauch und die Demontage

Entfernen Sie den Splashy Big nicht aus der Badewanne, bevor Sie die Sitzbasis und das Bodengestell lösen, da dies zu einer Belastung der Verbindungen führen kann.




Schnallen Sie das Kind ab und entfernen Sie es aus dem Splashy Big Sitz. Lassen Sie das Badewasser ab.



Siehe Abschnitt 9 für Hinweise, wie Sie das sicher tun können.


Um Splashy Big von dem Bodengestell zu lösen, drücken Sie den grünen Knopf am Neigungsarm und ziehen die Rückenlehne nach vorne.

Um die Sitzbasis zu lösen, ziehen **A** Sie an der grünen Kunststoffflasche und schieben Sie sie nach hinten. Anschließend heben Sie den Splashy Big von der Bodenstation dem Bodengestell ab. **B**

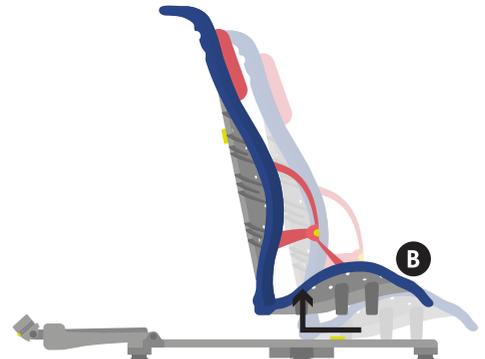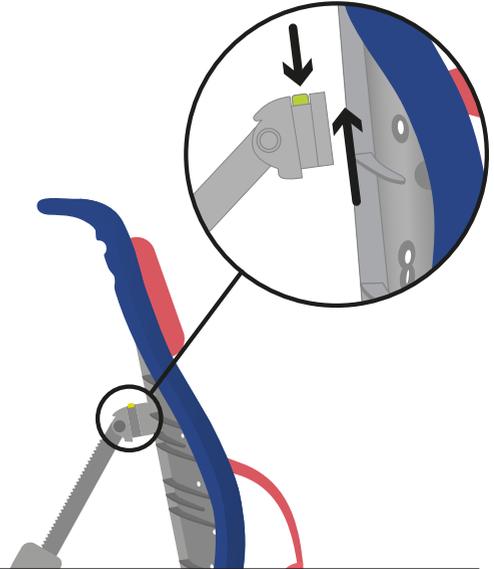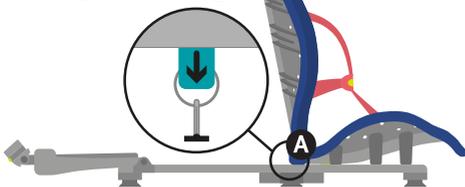


Achten Sie darauf, dass Sie den Rahmen nicht mit Gewalt aus der Badewanne drücken, da dies die Verbindungen strapazieren kann.

Um das Bodengestell aus der Badewanne zu entfernen, schieben Sie Ihre Hand vorsichtig unter die GummifüÙe, die dann nachgeben (kein Werkzeug verwenden)

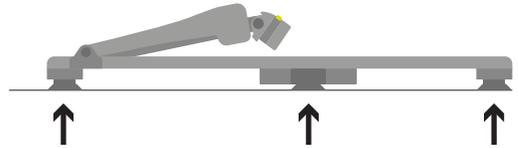

Legen Sie den Splashy Big auf die Seite und lösen Sie die Sitzbasis von der Rückenlehne, indem Sie die Rückenlehne nach hinten ziehen, um den Scharniermechanismus zu lösen.

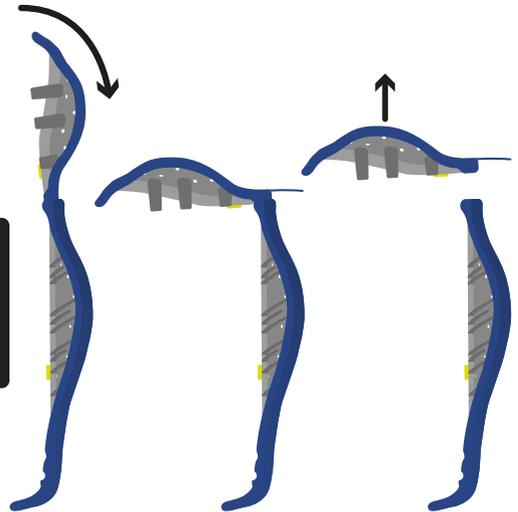

Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann die Garantie erlöschen.

11.8 Abtropfen und Trocknen

Achten Sie stets darauf, dass der Splashy Big Sitz abgewischt/abgewaschen wird, bevor Sie ihn abtropfen lassen und verstauen.

Das Bodengestell kann trocken gewischt werden. (Siehe Abschnitt 07 für weitere Informationen.)




Um das Bodengestell bei Nichtgebrauch zu verstauen, schieben Sie bitte den Neigungsarm in die unterste Stellung und legen es flach ab.

11.9: FüÙe des Bodengestells für den Außenbereich




1 Entfernen Sie die 6 SaugfüÙe von dem Bodengestell

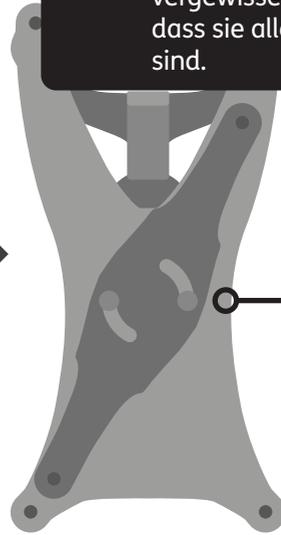

2 Fügen Sie die FüÙe für den Außenbereich durch Einschrauben im Uhrzeigersinn hinzu.

! Berühren Sie niemals zwei MittelfüÙe, vergewissern Sie sich, dass sie alle befestigt sind.

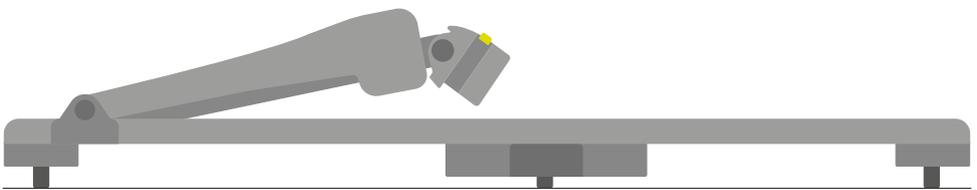

3 Vergewissern Sie sich, dass alle FüÙe festgeschraubt sind und das Bodengestell flach am Boden liegt.



Verwenden Sie keine FüÙe für den Außenbereich in der Badewanne/ Dusche. Bitte verwenden Sie die originalen SaugfüÙe des Bodengestells.

12: Größenangaben

Technische Informationen zum Splashy Big	
Höhe der Sitzlehne	720mm (28.5 Zoll)
Breite der Sitzlehne	450mm (17.5 Zoll)
Tiefe der Sitzbasis	400mm (15.5 Zoll)
Breite der Sitzbasis	450mm (17.5 Zoll)
Breite des Bodengestells	420mm (16.5 Zoll)
Breite des Bodengestells mit Stabilisator	665mm (26 Zoll)
Länge des Bodengestells	795mm (31 Zoll)
Maximales Gewicht	55kg (121lbs)
Altersgruppe	7-14 Jahre alt

Tabelle der Symbole

Symbol	Bedeutung
	Medizinprodukt
	Bedienungsanleitung lesen
	CE-Kennzeichnung
	Warnung
	Hersteller
	Modellnummer
	Seriennummer
	Max. Körpergewicht des Benutzers
	Herstelldatum
	Latexfrei
	Kennzeichnungssystem „Unique Device Identification“



FireflyfriendsLtd
19 Ballinderry Road
Lisburn BT28 2SA
Northern Ireland

fireflyfriends.com

(+44) 28 9267 8879
hello@fireflyfriends.com



LS1002-01